

INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO

Mantenimiento de rutina

Sistema Calentador-Enfriador 3T

Cronograma de desinfección y tareas relacionadas

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| A) previo a la operación;
antes de almacenar | ➔ | Desinfección de superficies y
desinfección de circuitos de agua | página 2 |
| B) tras cada operación | ➔ | Desinfección de superficies | página 2 |
| C) cada 7 días | ➔ | Cambio de agua;
Agregar peróxido de hidrógeno;
Desinfección de la botella de rebose | página 3
página 3
página 4 |
| D) cada 14 días | ➔ | Desinfección de circuitos de agua | página 5 |
| E) una vez por año | ➔ | Reemplazar las tuberías | página 10 |
| F) regularmente | ➔ | Tomar muestras de agua | página 10 |

NOTA: Estas Instrucciones de Inicio Rápido son solo un extracto de las Instrucciones de Operación (CP_IFU_16-XX-XX_USA_014) sobre el mantenimiento y desinfección de rutina del agua (capítulos 5 y 6). No reemplazan las Instrucciones de Operación. Para una configuración completa, uso de la máquina y advertencias y precauciones, deben seguirse las Instrucciones de Operación completas del Sistema Calentador-Enfriador.

A.1) DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

- 1.1 Cierre el conector CAN con la tapa correspondiente.
- 1.2 Use solo paños desinfectantes pre-impregnados, listos para usar.
- 1.3 Limpie todas las superficies accesibles del sistema.
- 1.4 Desinfecte todas las superficies accesibles del sistema. Asegúrese de que no entren líquidos en la carcasa.

A.2) DESINFECCIÓN DE CIRCUITOS DE AGUA

- 1.1 ver D) página 5 desinfección de circuitos de agua cada 14 días

B) tras cada operación**B.1) DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES**

- 1.1 Cierre el conector CAN con la tapa correspondiente.
- 1.2 Use solo paños desinfectantes pre-impregnados, listos para usar.
- 1.3 Limpie todas las superficies accesibles del sistema.
- 1.4 Desinfecte todas las superficies accesibles del sistema. Asegúrese de que no entren líquidos en la carcasa.

MATERIAL REQUERIDO (paños desinfectantes listos para usar)

Nombre del producto	Fabricante
Bacillol	Bode
CaviWipe	Metrex
Super Sani Cloth	PDI
Meliseptol HBV	B. Braun
Mikrozid AF	Schülke & Mayr

C.1) DRENAJE


- 1.1 Drene los tanques de agua.




- 1.2 Asegúrese de que las válvulas de drenaje estén cerradas una vez que los tanques estén vacíos.

**C.2) LLENAR Y AGREGAR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO**

- 2.1 Abra el llenado.
Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que parpadee la primera barra naranja.

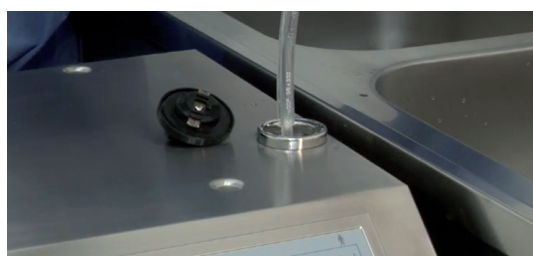

- 2.2 Agregue 150 ml de peróxido (H_2O_2).

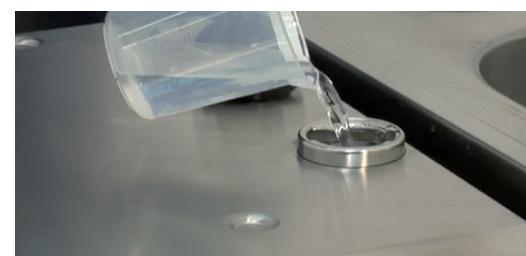

- 2.3 Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes.
Cierre el llenado del tanque.



- 2.4 Desconecte la tubería de cortocircuito paciente 1.



- 2.5 Cree un cortocircuito entre la entrada de cardioplegia y la entrada del paciente 1 mientras desinfecta la tubería y el conector del dispositivo.



- 2.6 Inicie cardioplegia fría.
Circule durante 5 min.



- 2.7 Detenga la cardioplegia fría.

- 2.8 Apague el dispositivo.

C.3) DESINFECCIÓN DE LA BOTELLA DE REBOSE

GUÍA RÁPIDA

I Calentador-Enfriador 3T

- 3.1 Vacíe la botella de rebose.



- 3.2 Desinfecte la botella de rebose con desinfección químico-térmica automática en una lavadora-desinfectadora.




C) cada 7 días

D.1) PREPARACIÓN

- 1.1 Asegúrese de usar gafas y ropa de protección. Desinfecte sus manos.



- 1.2 Use el filtro de agua Aquasafe de Pall para llenar el dispositivo con agua del grifo filtrada. Asegúrese de que el filtro no esté vencido.

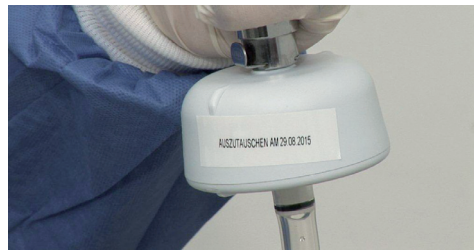

- 1.3 Encienda el dispositivo. Silencie la alarma de nivel bajo.



- 1.4 Abra el llenado. Desinfecte el llenado y la tubería del filtro de agua. Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que parpadee la primera barra naranja.




D) cada 14 días

D.2) AGREGAR DESINFECTANTE

- 2.1 Mida 450ml de Puristeril 340 o 450ml Peresal o 450ml Minncare o 180ml Clorox. Vierta el desinfectante en el dispositivo.



- 2.2 Agregue agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes. Cierre el llenado del tanque. Asegúrese de que todos los circuitos estén cerrados.

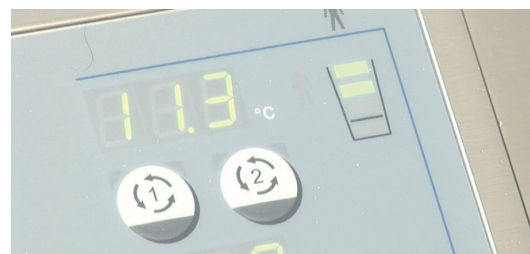


- 2.3 Desinfecte los conectores de la tubería. Desinfecte los conectores del dispositivo.



- 2.4 Cree un cortocircuito entre la entrada de cardioplegia y la entrada del paciente 1. Asegúrese de que todos los circuitos estén cerrados.



- 2.5 Configure la cardioplegia fría a 10 °C.
Configure la cardioplegia caliente y la temperatura del paciente a 20 °C.

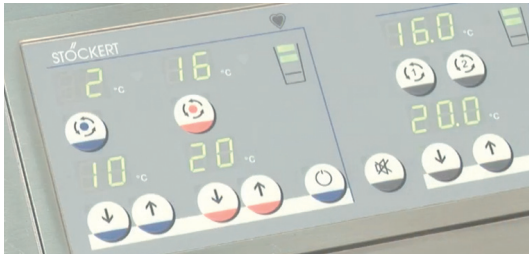

D.3) DESINFECTAR (5 MIN.)

- 3.1 Inicie cardioplegia fría.
Circule durante 5 min.
Detenga la cardioplegia fría.



- 3.2 Desinfecte la tubería de cortocircuito adicional.
Desinfecte los conectores del dispositivo.
Establezca una tubería de cortocircuito para el paciente 2.



- 3.3 Desconecte y desinfecte el cortocircuito establecido.
Desinfecte el conector del dispositivo.
Establezca la tubería de cortocircuito para cardioplegia.



- 3.4 Desinfecte los conectores de la tubería más larga y el adaptador de cortocircuito. Conecte ambos extremos de la tubería con el adaptador de cortocircuito.



- 3.5 Desinfecte los conectores del dispositivo.
Desinfecte los conectores de la tubería.
Establezca la tubería de cortocircuito para el paciente 1.



- 3.6 Abra todas las válvulas.



D) cada 14 días

D.4) DESINFECTAR (10 MIN.)

GUÍA RÁPIDA

I Calentador-Enfriador 3T

4.1 Inicie cardioplegia caliente y paciente 1 y 2. Circule durante 10 min.

4.2 Cierre todas las válvulas mientras los circuitos están funcionando para vaciar la tubería.

4.3 Cuando las tuberías estén vacías detenga todos los circuitos.

D.5) DRENAJE 1


5.1 Desinfecte las tuberías de drenaje y los drenajes. Conecte ambas tuberías de drenaje.



5.2 Abra ambos drenajes. Drene el dispositivo completamente.



5.3 Cierre ambos drenajes.

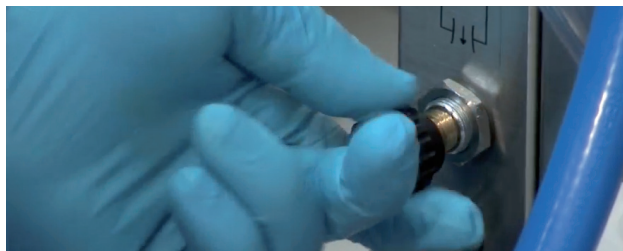

D) cada 14 días

D.6) ENJUAGUE 1

- 6.1 Abra el llenado del tanque.
Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes. Cierre el llenado del tanque.



- 6.2 Abra todas las válvulas.
Inicie cardioplegia caliente y paciente 1 y 2. Circule durante 3 min.



- 6.3 Cierre todas las válvulas mientras los circuitos están funcionando para vaciar la tubería.



- 6.4 Cuando las tuberías estén vacías detenga todos los circuitos.

D.7) DRENAJE 2

- 7.1 Abra ambos drenajes.
Drene el dispositivo completamente.

- 7.2 Cierre ambos drenajes.

D.8) ENJUAGUE 2

- 8.1 Abra el llenado del tanque.
Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes. Cierre el llenado del tanque.

- 8.2 Abra todas las válvulas.
Inicie cardioplegia caliente y paciente 1 y 2. Circule durante 3 min.

- 8.3 Cierre todas las válvulas mientras los circuitos están funcionando para vaciar la tubería.


- 8.4 Cuando las tuberías estén vacías detenga todos los circuitos.

D.9) DRENAJE 3


- 9.1 Abra ambos drenajes.
Drene el dispositivo completamente.

- 9.2 Cierre ambos drenajes.

- 10.1 Abra el llenado.
Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que parpadee la primera barra naranja.

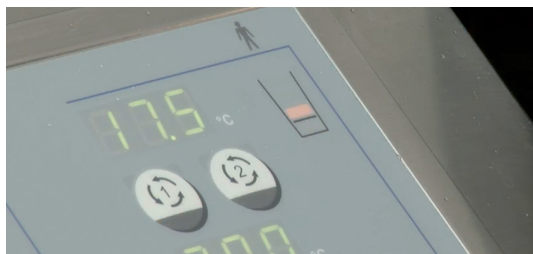

- 10.2 Agregue 150 ml de peróxido (H_2O_2).

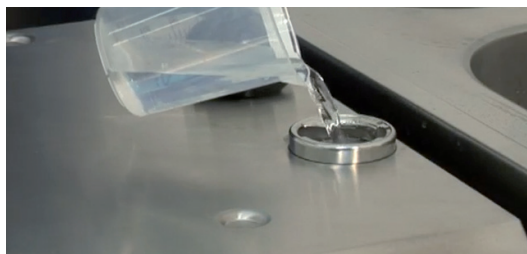

- 10.3 Llene el dispositivo con agua del grifo filtrada hasta que 2 barras estén verdes.
Cierre el llenado del tanque.



- 10.4 Desconecte la tubería de cortocircuito paciente 1.

- 10.5 Cree un cortocircuito entre la entrada de cardioplegia y la entrada del paciente 1 mientras desinfecta la tubería y el conector del dispositivo.



- 10.6 Inicie cardioplegia fría.
Circule durante 5 min.



- 10.7 Detenga la cardioplegia fría.


- 10.8 Apague el dispositivo.



NOTA: La botella de rebose también debe desinfectarse regularmente (ver C.3) página 4).

E.1) REEMPLAZAR LAS TUBERÍAS

- 1.1 Las tuberías que se usan con el calentador-enfriador deben reemplazarse una vez al año.
- 1.2 Incluya las tuberías en la desinfección como se describe. Conecte las tuberías al calentador-enfriador durante el ciclo de desinfección.

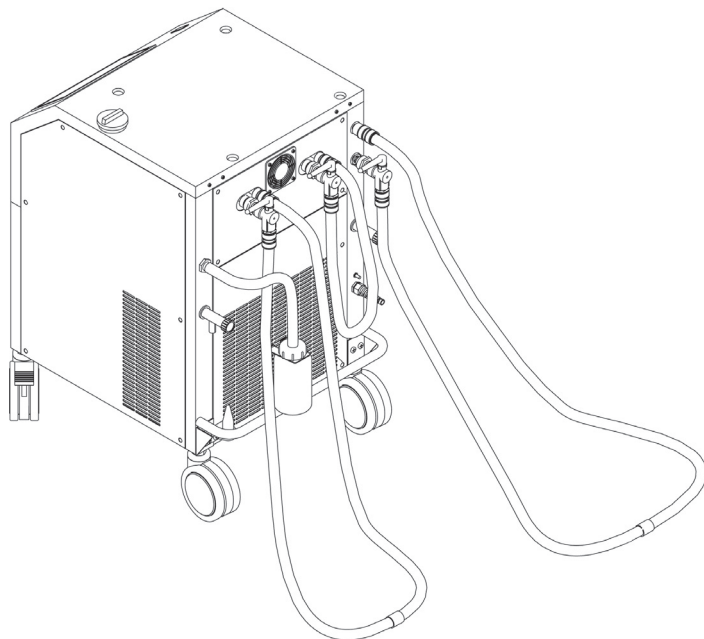

F) regularmente

F.1) TOMAR MUESTRAS DE AGUA

- 1.1 Desinfecte los puertos de drenaje (rocíe, limpie).
- 1.2 Solo si la desinfección no se ha realizado correctamente, se deben tomar y analizar muestras de agua. Abra el puerto de drenaje. Deje correr el agua un rato (5 seg) y luego tome la muestra de agua del chorro de agua que corre.

NOTA: Use solo tuberías certificadas para sistemas de agua potable, como el número de parte SORIN 75-510-218.